


[별표 1] 살모넬라 균분리 검사법 (제10조 관련)

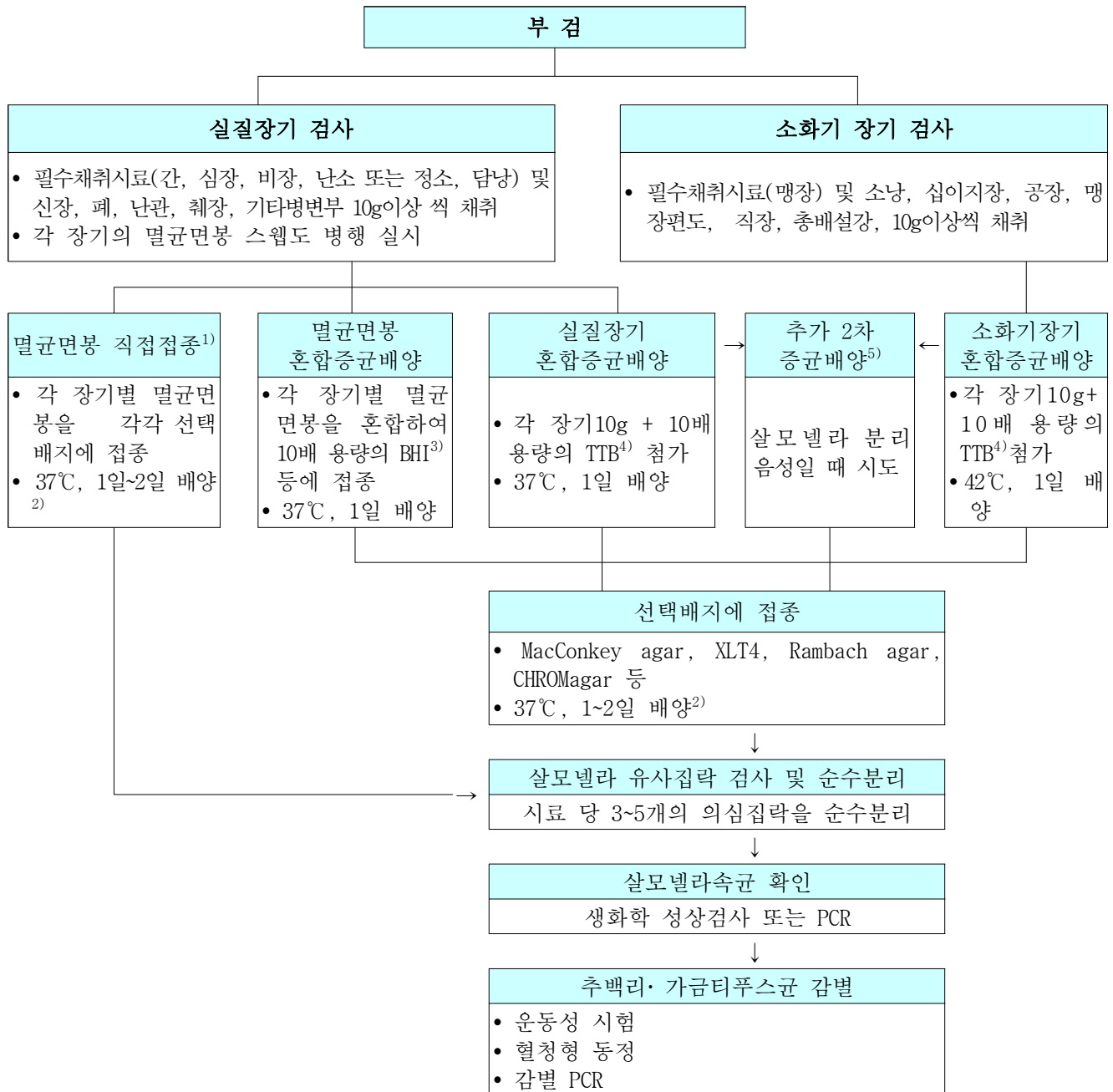

1) 병변이 있을 경우에만 직접접종 실시

2) 추백리·가급티푸스균은 발육속도와 H₂S 산생능이 약하므로 1일 배양 후 살모넬라 유사집락이 관찰되지 않으면 추가배양 실시

3) brain-heart infusion

4) tetrathionate broth

5) 추가 2차 증균배양: 실질장기 또는 소화기장기 혼합증균배양에서 살모넬라균이 분리되지 않는 경우 증균배양액을 추가로 5~7일간 실온에 보관한 뒤 1 mL를 새로운 TTB 10 mL에 접종하여 37℃, 1일 배양한 후 선택배지에 접종 실시