


[별표 2] 닭마이코플라스마병 균분리 및 유전자 검사법 (안 제10조의2 관련)

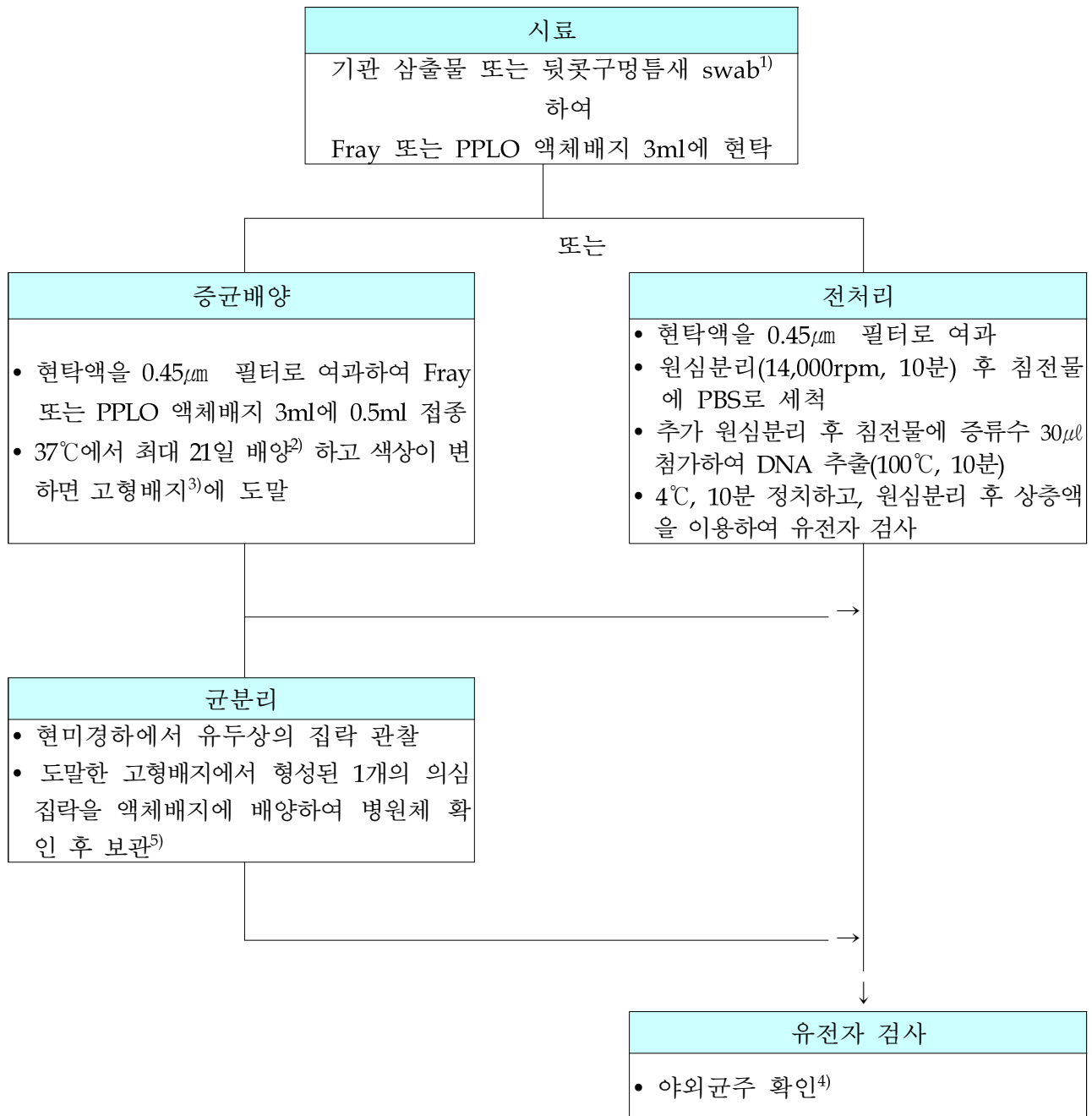

- 1) 시료에 대해 직접 유전자 검사를 실시하는 경우에는 최대 5개씩 시료를 혼합하여 검사할 수 있음
- 2) 37℃에서 배양하면서 매일 관찰하고 색깔의 변화가 없어도 균 분리율을 높이기 위해 7일 간격으로 Fray 또는 PPLO 액체배지(3ml에 0.5ml 접종)에 계대배양
- 3) Fray 또는 PPLO 고형배지는 기존의 액체배지 성분에서 1% agar 첨가
- 4) 유전자 검사를 실시하여 야외균주로 확인되면 양성계균으로 최종 판정
- 5) 확인된 병원체는 액체배양액 0.8ml와 glycerol 0.2ml를 혼합하여 -80℃에 보관